

Шановні лікарі-стоматологи!


Ми раді повідомити Вам про появу в ортопедичному арсеналі імплантаційної системи In-Kone® (Global D, France) нової, очікуваної Вами опції – **абатментів з посиленою основою POSTERIOR**.

Ці абатменти розроблені, пройшли клінічні випробування і запропоновані для використання, насамперед, в дистальних відділах щелепи, особливо в ситуаціях з надмірним оклюзійним стресом, внаслідок бруксизму або неправильного розподілу жувального навантаження. Відтепер тривоги про злам абтмента у Вашого пацієнта залишаються в минулому.

Іноваційною відмінністю **абатментів POSTERIOR** є зміщення втрішньої різьби в абатменті нижче рівня переходу «імплантат-абатмент» (див. малюнок 1). Це дозволило суттєво зміцнити конструкцію основи абатменту саме в цьому критичному для можливого зламу місці і створити умови вилучення рештків абатмента з імплантата навіть при його зламі звичайним екстрактором без використання додаткових спеціальних інструментів.

Нова опція доступна в стандартних діаметрах 5,0, 6,5 мм, та титанових основах діаметром 5,5 мм (див. малюнок 2), вартість абатментів і титанових основ залишилась незмінною. **Абатменти POSTERIOR** вже наявні на наших складах продукції в Чернівцях і в Києві та доступні для замовлення!

мал. 1

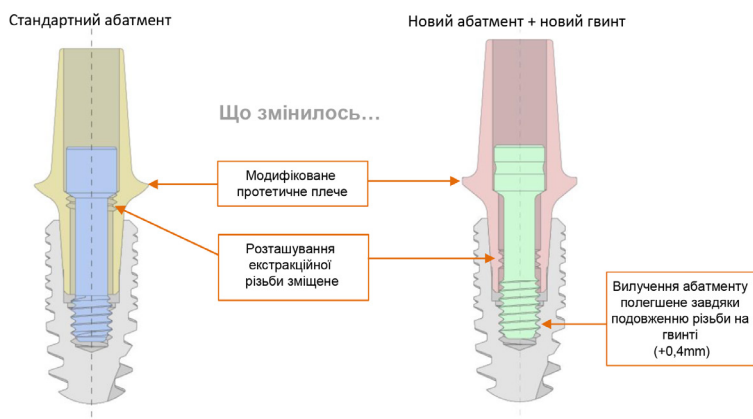

мал. 2

Парадонтальна висота (g)	Діаметр (d)	
	Ø 5	Ø 6.5
1.5	DFMLTDPVCI5H1.5-2	DFMLTDPVCI6.5H15-2
2.2	DFMLTDPVCI5H2.2-2	DFMLTDPVCI6.5H22-2
3	DFMLTDPVCI5H3-2	DFMLTDPVCI6.5H3-2
4	DFMLTDPVCI5H4-2	DFMLTDPVCI6.5H4-2

Парадонтальна висота (g)	Код продукції
2.2	DEVCI5.5H2.2
3	DEVCI5.5H3
4	DEVCI5.5H4

Дякуємо вам за плідну і цікаву співпрацю та за постійний інтерес до нашої продукції для імплантологічного лікування Ваших пацієнтів. Охоче відповімо на Ваші запитання щодо нового продукту та всіх інших продуктів нашого партнера - компанії Global D.

Інформуватимемо Вас про всі останні новини і пропозицій для успіху Вашої практики!

З повагою, IMPLANTISS.